

Polygrafie Patiënten instructie

MiniScreen Pro

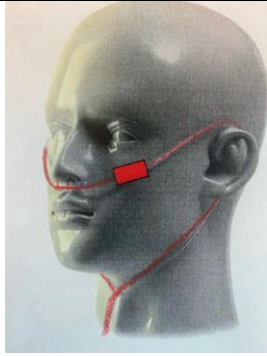
Bij dit onderzoek worden tijdens uw slaap verschillende signalen gemeten:

- ademhaling
- zuurstofgehalte van het bloed
- snurken
- hartritme
- lichaamshouding

Vorbereiding

- Voor een betrouwbare meting van het zuurstofgehalte is het van belang dat u tenminste 1 vinger vrij heeft van nagellak en/of gelnagel.
- Draag voor het onderzoek een aansluitend T-shirt of hemd waarover de apparatuur aangebracht kan worden

Nodig • Vingersensor voor zuurstofmeting • Neusbrilletje • Borstband met Slaaprecorder en sensoren • Buikband met sensor • 3 stukjes tape	
• De Onderzoekmedewerker heeft voor u de sensoren van de borstband, de vingersensor en het neusbrilletje al aangesloten op de Slaaprecorder. • De Recorder is ingesteld op de besproken tijd en gaat automatisch aan.	

• Doe een t shirt aan om in te slapen en bevestig de elastieken borstband met de Slaaprecorder op de borst met de klittenbandsluiting. • Bevestig de buikband ter hoogte van de navel met de klittenbandsluiting.	
• Draai de zwarte connector van de buikband onderin de recorder in de middelste (zwarte)aansluiting.	
• Doe de neusbril op door de canules in de neusgaten te plaatsen. De slangen achter de oren langs onder de kin vastzetten • Neusbril bevestigen met tape op beide wangen.	
• Doe de vinger in de grijze sensor, zodat de kabel over de rug van de hand loopt. Bevestig de kabel met tape op de handrug	
Via deze QR code is een korte instructievideo te bekijken.	
De volgende ochtend • Verwijder het neusbrilletje, knip het uiteinde af (het witte deel) en gooi dit weg. • Verwijder de zuurstofmeter van de vinger. • De klittenbandsluiting van de banden losmaken en doe de banden met Recorder in de bak • Logboek invullen en opgevouwen in de envelop in de bak leggen. • De box de volgende werkdag inleveren tussen 8.30 en 9.30 uur bij de balie.	